

# COLD<sup>TM</sup> Collection Smart Pliers

By ThermalOrth Philosophy System

Sono l'espressione tecnologica più avanzata degli strumenti progettati per lavorazioni su allineatori.

Le **Smart Pliers**® di **Cold Collection** non hanno bisogno di essere termoregolate, lavorano a freddo su allineatori di 0,5 - 0,625 - 0,75 - 0,85 - 1,00mm. Uno spessore maggiore potrebbe compromettere la funzionalità dello strumento. Con le **Cold Pliers** si modificano **istantaneamente** gli allineatori in studio senza interrompere il trattamento.

Sono di facile impiego e consentono molteplici soluzioni su pazienti che utilizzano allineatori.

## Half Moon




TP-001-084/SM




Rimuove con precisione la plastica sull'allineatore per inserimento di bottoni, accessori, ecc...

## Hole Key

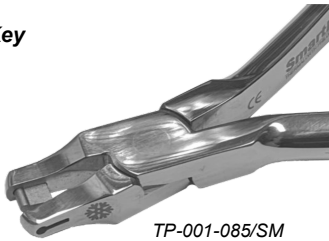

TP-001-085/SM

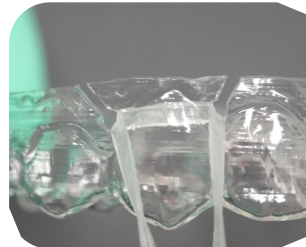

Crea delle asole sull'allineatore per inserimento di elastici per trazioni di 2°/3° Classe, intrusioni, ecc...

## Triangular




TP-001-087/SM



Contorna perfettamente i bordi della plastica per una finitura superveloce e precisa degli allineatori

## Aligner Punch

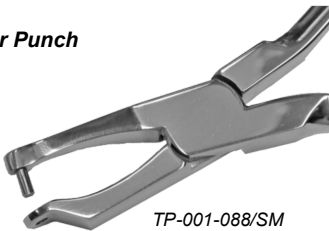

TP-001-088/SM



Crea fori per aderire agli attachments aumentando la ritenzione dell'allineatore, oppure per inserire un elastico per spostamenti dentali

**Garanzia** - Le pinze sono garantite 5 anni. La garanzia decade in caso di uso improprio, manomissione o utilizzo di ricambi non originali. La garanzia non copre le spese di manodopera e trasferta, che saranno sempre e comunque a carico dell'acquirente.

**Istruzioni per la manutenzione** - Le **Smart Pliers** di **Cold Collection** sono costruite in Acciaio Medicale Giapponese per garantire una maggiore durata nel tempo. Devono essere lavate e asciugate accuratamente. Successivamente vanno lubrificate con olio sintetico cod.001-115 (solo una goccia). Le cause principali di macchie e decolorazioni sono da attribuire ad un eccesso di lubrificante e ad un'errata pulizia (lavaggio e asciugatura non eseguite in modo corretto) prima della sterilizzazione. Eventuali macchie gialle o marroni possono essere rimosse strofinando le pinze con lana di acciaio extrafine.

Per maggiori dettagli relativamente al prodotto, si rimanda alla scheda tecnica da richiedere all'azienda produttrice **Orthodontics High Design srl**.

# COLD<sup>TM</sup> Collection Smart Pliers

By ThermalOrth Philosophy System

*They are the most advanced technological expression of instruments designed to be used on aligners.*

*The Cold Collection Smart Pliers® do not need to be thermoregulated, since they work cold on 0.5 - 0.625 - 0.75 - 0.85 - 1.0mm. aligners. A greater thickness could compromise the functionality of the instrument. With the Cold Pliers you can instantly modify the aligners in the dental practice without interrupting the treatment.*

*They are easy to use and allow multiple solutions on patients who wear aligners.*

## Half Moon




TP-001-084/SM




*It removes the plastic on the aligner with great precision, for the insertion of buttons, accessories, etc*

## Hole Key

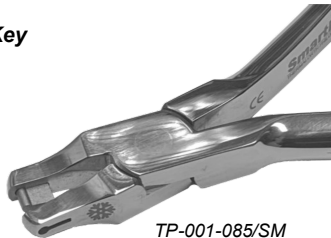

TP-001-085/SM

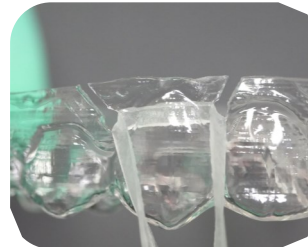


*It makes holes on the aligner for the insertion of elastics for 2nd/3rd classes tractions, intrusions, etc...*

## Triangular




TP-001-087/SM

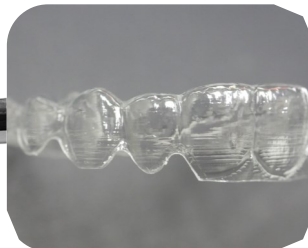


*It perfectly contours the edges of plastics for a very fast and precise aligner finishing.*

## Aligner Punch

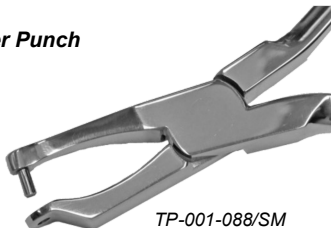

TP-001-088/SM

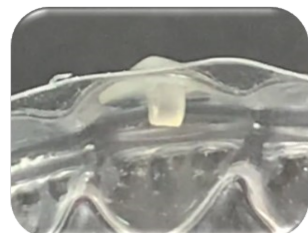

*It makes holes to adhere to attachments by increasing the aligner retention or to insert an elastic for dental movements.*

**Warranty** - The pliers are guaranteed for 5 years. The warranty is void in case of improper use, tampering or use of non-original spare parts. The warranty does not cover labor and travel expenses, which will always and in any case be borne by the buyer.

**Maintenance Instructions** - The Cold Collection Smart pliers are manufactured by using the Japanese medical stainless steel to guarantee a longer duration over time. They must be washed and dried thoroughly. Subsequently they must be lubricated with synthetic oil code 001-115 (only one drop). The main causes of spots and discolorations are due to a lubricant excess and to an incorrect cleaning (washing and drying not properly carried out) before sterilization. Any yellow or brown spots can be removed by rubbing the pliers with extra fine steel wool.

**For further details regarding the product, please refer to the technical data sheet to be requested to the manufacturer Orthodontics High Design srl.**

# COLD<sup>TM</sup> Collection Smart Pliers

By ThermalOrth Philosophy System

Son la expresión tecnológica más avanzada de las herramientas diseñadas para trabajar los alineadores

Los **Cold Collection Smart Pliers**® no necesitan termostatación, funcionan en frío en alineadores de 0,5 - 0,625 - 0,75 - 0,85 - 1,00 mm. Un espesor mayor podría comprometer la funcionalidad del instrumento. Con Cold Pliers puede cambiar **instantáneamente** sus alineadores en la práctica dental sin interrumpir su tratamiento.

Son fáciles de usar y permiten múltiples soluciones en pacientes que utilizan alineadores.

## Half Moon




TP-001-084/SM




Elimina con precisión el plástico del alineador para insertar botones, accesorios, etc...

## Hole Key

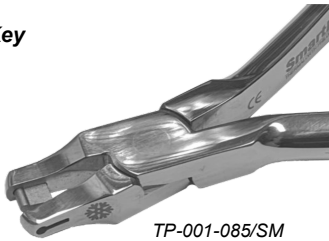

TP-001-085/SM

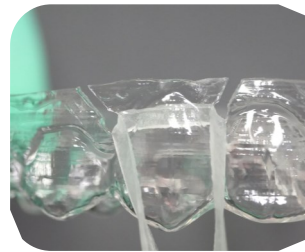

Crea ranuras en el alineador para insertar elásticos para tracciones de 2ª/3ª Clase, intrusiones, etc...

## Triangular




TP-001-087/SM




Contornea perfectamente los bordes del plástico para un acabado súper rápido y preciso de los alineadores

## Aligner Punch

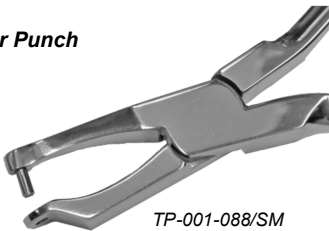

TP-001-088/SM

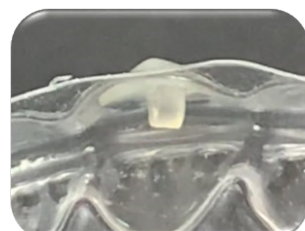

Crea orificios para adherirse a los aditamentos, aumentando la retención del alineador, o para insertar una banda elástica para movimientos dentales

**Garantía** - Los alicates tienen una garantía de 5 años. La garantía queda anulada en caso de uso indebido, manipulación o uso de repuestos no originales. La garantía no cubre los gastos de mano de obra y desplazamiento, que correrán siempre a cargo del comprador.

**Instrucciones de mantenimiento** - Los **Smart Pliers Cold Collection** están hechos de acero médico japonés para garantizar una vida más larga. Deben lavarse y secarse completamente. Posteriormente se deben lubricar con aceite sintético cód. 001-115 (solo una gota). Las principales causas de manchas y decoloraciones se pueden atribuir a un exceso de lubricante y una limpieza incorrecta (lavado y secado no realizados correctamente) antes de la esterilización. Las manchas amarillas o marrones se pueden eliminar frotando las alicates con lana de acero extrafina.

Pour plus de détails sur le produit, veuillez vous référer à la fiche technique à demander auprès du producteur Orthodontics High Design srl.

# COLD™ Collection Smart Pliers

By ThermalOrth Philosophy System

*Ils sont l'expression technologique la plus avancée des outils conçus pour travailler sur les aligneurs.*

*Les **Smart Pliers® Cold Collection** n'ont pas besoin d'être thermorégulées, elles fonctionnent à froid sur les aligneurs 0,5 - 0,625 - 0,75 - 0,85 - 1,00mm. Une plus grande épaisseur pourrait compromettre la fonctionnalité de l'instrument. Avec les Cold Pliers, on peut modifier **instantanément** les aligneurs au cabinet dentaire, sans interrompre le traitement.*

*Ils sont faciles à utiliser et ils permettent plusieurs solutions sur les patients qui utilisent les aligneurs.*

## Half Moon




TP-001-084/SM



*Enlève avec précision le plastique sur l'aligneur pour insérer des boutons, des accessoires, etc.*

## Hole Key

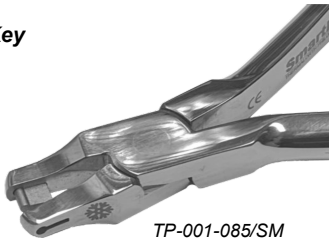

TP-001-085/SM




*Crée des fentes sur l'aligneur pour l'insertion d'élastiques pour les tractions de 2ème/3ème classe, intrusions, etc....*

## Triangular




TP-001-087/SM

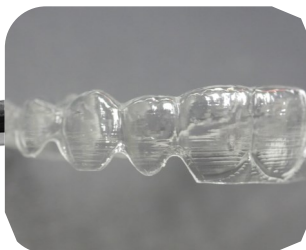


*Contourne parfaitement les bords du plastique pour une finition ultra-rapide et précise des aligneurs*

## Aligner Punch

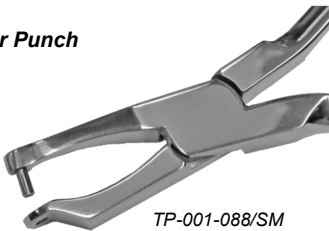

TP-001-088/SM

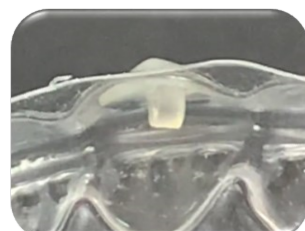

*Crée des trous pour adhérer aux attachements, en augmentant la rétention de l'aligneur, ou pour insérer un élastique pour les déplacements dentaires*

**Garantie** - Les pinces sont garanties 5 années. La garantie est annulée en cas d'utilisation inappropriée, d'altération ou d'utilisation de pièces de rechange non originales. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et de déplacement, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

**Instructions d'entretien** - Les pinces **Smart Pliers Cold Collection** sont fabriquées en Acier Médical Japonais pour garantir une durée de vie plus longue. Elles doivent être soigneusement lavées et séchées. Ensuite, elles doivent être lubrifiées avec de l'huile synthétique code 001-115 (juste une goutte). Les principales causes de taches et de décolorations peuvent être attribuées à un excès de lubrifiant et à un nettoyage incorrect (lavage et séchage non effectués correctement) avant la stérilisation. Eventuelles taches jaunes ou brunes peuvent être éliminées en frottant les pinces avec de la laine d'acier extra fine.

**Para más detalles sobre el producto, consulte la ficha técnica que debe solicitar a la empresa fabricante Orthodontics High Design srl.**